

COLLECTEUR DE DECHETS MEDICAUX EVO 60L MONO – JAUNE



REFERENCE N° YWCMY002

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS CONCERNANT L'ENTREPRISE

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Nom | YOUNA International Medical Solution |
| Adresse complète | Route des Jeunes 35, 1227 Carouge GE |
| Téléphone | +41 22 252 41 20 |
| Site Internet | www.youna-ims.com |

INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU ÉQUIPEMENT

| | |
|------------------------------------|---|
| Dénomination commune | Collecteurs de déchets médicaux |
| Dénomination commerciale | Collecteurs de déchets médicaux 60L |
| Code nomenclature Cladimed | N/A |
| Code LPPR* (ex TIPS si applicable) | N/A |
| Selon Annexe n° | N/A |
| Descriptif du dispositif | Utilisé pour l'élimination des déchets d'activité des soins à risques infectieux. |

Caractéristiques

- Matériel : Polypropylène
- Couleur : Jaune
- Fermeture : Couvrete monobloc sans opercule avec colle
- Forme : Parallélépipédique
- Poids : 1.794 kg
- Dimensions extérieures : 300x400x641 H mm (couvrete fermé)
- Capacité utile : 46,7Lt. (Marquage à 56cm H)
- Capacité de charge max : 25 kg
- Capacité réelle : 55Lt.
- Volume : 60Lt.
- En ISO : 23907



Conditionnement / emballages

| Référence | UCD Unité de Commande | CDT Multiple de l'UCD | QML Quantité mini de livraison |
|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | | 1 palette = 212 pièces | 1 palette par article |

| | |
|--|---------------|
| Principaux composants et matériaux | Polypropylène |
| Présence de latex | Non |
| Présence de produits d'origine animale ou biologique | Non |

| | |
|-----------------------|---|
| Domaine et indication | <ul style="list-style-type: none"> • Le collecteur de déchets est devenu une priorité incontournable dans le domaine de la santé. Chaque jour les établissements de soins génèrent une quantité considérable qui nécessite une gestion appropriée pour éviter les risques sanitaires et préserver l'environnement. |
|-----------------------|---|

CONDITIONS DE CONSERVATION

| | |
|---|---|
| Conditions de conservation et de stockage | À conserver dans un environnement sec et à température ambiante |
| Précautions particulières | Usage Unique. Ne pas utiliser si le produit est abîmé. |
| Durée de validité du produit | 5 ans |

CONSEILS D'UTILISATION


| | |
|--------------------|--|
| Performance | Équipement à usage unique, protection hygiène |
| Contre-indications | Les personnes allergiques à l'un des composants du produit |
| Péremption | Il est recommandé de ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage |

MODE D'EMPLOI

Fermeture provisoire : Appuyer le couvercle sur le corps sans presser

Positionnement du couvercle en phase d'utilisation :

Le couvercle mono peut être accroché au corps :
Sur le bord du côté long / sur le bord du côté court

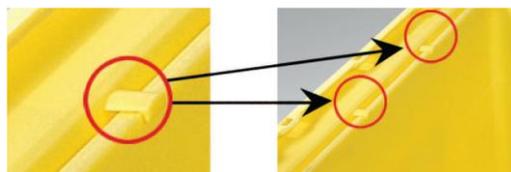

Fermeture définitive :

1° utilisation :

Presser en même temps sur 2 angles opposés pour insérer le couvercle sur le corps.




2° utilisation :

Répéter l'opération 1 sur les 2 autres angles opposés



3° utilisation :

Presser en même temps sur les bords des 2 côtés courts et insérer les 2 agrafes des côtés courts.

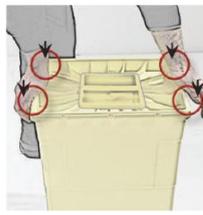

4° utilisation :

Répéter l'opération 3 sur les bords des 2 côtés longs et insérer les 3 agrafes des côtés longs.



NOTICE

Our company philosophy is in continuous improvement and reserves the right to change the contents of the specifications contained herein without notice of change.