

COLLECTEUR DE DECHETS MEDICAUX CS PLUS 2L – JAUNE/ROUGE



RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS CONCERNANT L'ENTREPRISE

Nom	YOUNA International Medical Solutions
Adresse complète	Route des Jeunes 35, 1227 Carouge GE
Téléphone	+41 22 252 41 20
Site Internet	www.youna-ims.com

REFERENCE N° YSCCS020

INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU ÉQUIPEMENT

Dénomination commune	Collecteur de déchets médicaux
Dénomination commerciale	Collecteur de déchets médicaux 2L
Code nomenclature Cladimed	N/A
Code LPPR* (ex TIPS si applicable)	N/A
Selon Annexe n°	N/A

Descriptif du dispositif Collecteur à usage unique pour l'élimination d'objets piquants, coupant et tranchants. (Hôpitaux, cliniques, Ehpad...)

Caractéristiques

- Matériel : Polypropylène
- Couleur : Corps jaune, couvercle rouge
- Dimensions extérieures : 151x151x200 H mm (couvercle monté)
- Forme : Base carrée
- Poids : 242g
- Charge maximale : 1.300gr
- Capacité nominale : 2,00Lt
- Capacité réelle : 2,39Lt
- Capacité utile : 2,00L
- EN ISO : 23907-1 :2019 – Kite Mark



Conditionnement / emballages

Référence	UCD Unité de Commande	CDT Multiple de l'UCD	QML Quantité mini de livraison
	Carton de 62 pièces	1 palette = 1116 pièces	1 palette par article

Principaux composants et matériaux Polypropylène

Présence de latex Non

Présence de produits d'origine animale ou biologique Non

Domaine et indication

Le collecteur de déchets est devenu une priorité incontournable dans le domaine de la santé. Chaque jour, les établissements de soins génèrent une quantité considérable de déchets qui nécessite une gestion appropriée pour éviter les risques sanitaires et préserver l'environnement.

CONDITIONS DE CONSERVATION

Conditions de conservation et de stock	À conserver dans un environnement sec et à température ambiante
Précautions particulières	Usage Unique. Ne pas utiliser si le produit est abîmé.
Durée de validité du produit	5 ans


CONSEIL D'UTILISATION

Performance	Equipement à usage unique, protection et hygiène
Contre-indication	Les personnes allergiques à l'une des composantes du produit
Péremption	Il est recommandé de ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage

MODE D'EMPLOI

Montage du couvercle


Positionner avec le couvercle avec la languette du côté marquage et appuyer fortement sur les angles opposés (1). Ensuite appuyer sur les 2 autres angles (2). Des clics se feront entendre à chaque pression et confirmeront le montage du couvercle. Si nécessaire appuyer sur le centre des bords (3-4).

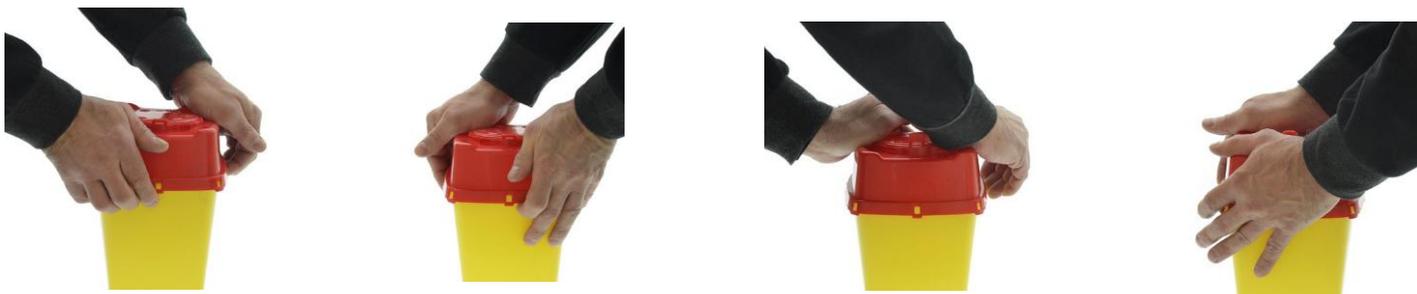

Fermeture provisoire

Prendre la languette de l'opercule (1)
Et l'appuyer sur le rebord du couvercle « 1PROV » (2)

Dans cette position, la réouverture est possible.
Pour la réouverture, appuyer sur la languette (1)
Et soulevez le couvercle (2)

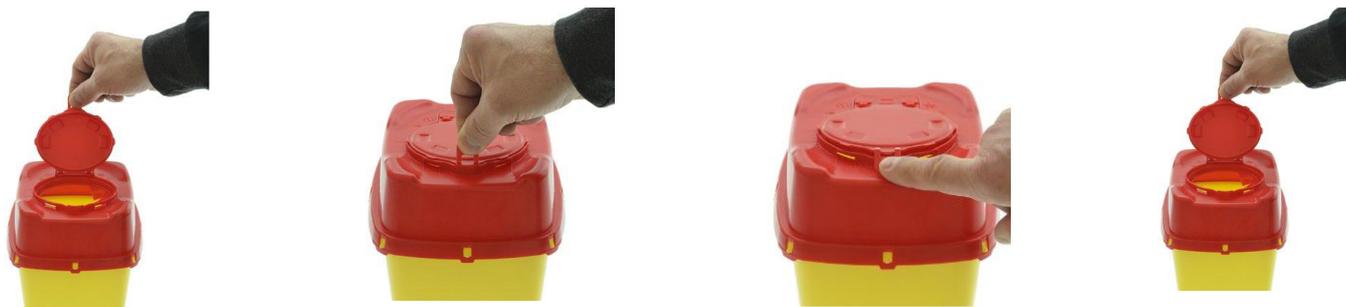

Fermeture définitive

Placer l'opercule en position de fermeture provisoire et appuyer fortement d'abord sur les « 1DEF » centraux (1) et ensuite sur les « 2DEF » latéraux (2). Dans cette position, la fermeture est définitive.



Désolidarisation des aiguilles

Utiliser les encoches en « V » pour désolidariser l'aiguille de la seringue
Et/ou dévisser les aiguilles de prélèvement sous vide (1)

Utiliser l'encoche en marguerite pour dévisser les aiguilles des stylos à
Insuline (2)



NOTICE

Our company philosophy is in continuous improvement and reserves the right to change the contents of the specifications contained herein without notice of change.